



GUIDA RAPIDA - ITALIANO




eFOLDi

Apertura della sedia elettrica eFOLDi

Prima di iniziare, posizionare la Carrozzina elettrica in uno spazio aperto lontano da animali domestici e bambini piccoli.

L'apertura è semplice e con un po' di pratica sarai in grado di configurarla in pochi secondi.

Vi consigliamo di esercitarvi con la Power Chair prima di avventurarvi all'aperto per la prima volta.

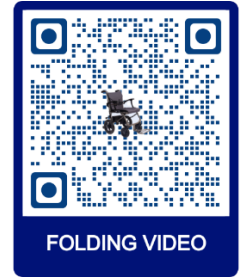

FOLDING VIDEO



1 Le ruote antiribaltamento e il caricabatteria sono forniti con la carrozzina elettrica.

2 Installare le ruote antiribaltamento. Questi semplicemente premono e si bloccano in posizione.

3 Aprire la carrozzina elettrica semplicemente spingendo la parte inferiore del sedile verso il basso mentre si tira la leva di rilascio verso l'alto.



4 Installare i supporti del bracciolo nelle fessure e premerli verso il basso affinché non si bloccano. **Tenere i cavi lontani dai punti di pizzicamento**

5 Prendi l'unità di controllo e l'asta e...

6 ...inserire l'asta del controller nell'attacco del bracciolo sotto il bracciolo.



7 regolare la posizione del controller e serrare con la manopola zigrinata.

8 ... Rimuovere il controllo dell'assistente dalla tasca posteriore e attaccarlo alla barra sul retro.

9 abbassare il poggiatesta.



10 Installare i cuscini del sedile come mostrato. Questi sono tenuti in posizione da linguette in velcro. Assicurati che siano ripiegati sopra lo schienale e sotto il sedile.

11 Inserire le batterie finché non scattano in posizione. La tua Carrozzina è ora pronta.

12 Accendere la carrozzina elettronica premendo il pulsante POWER. Fare riferimento al manuale per informazioni complete.

Piegare la sedia elettrica eFOLDi



1

Spegnere l'alimentazione utilizzando il pulsante POWER sull'unità di controllo manuale.

Spegnere sempre l'alimentazione quando la sedia non è in uso per risparmiare la carica della batteria.



2

Allentare leggermente la manopola zigrinata e rimuovere il controller. Posizionare il controller e la cintura di sicurezza sul cuscino del sedile. **Riavvitare la manopola per evitare perdite.**



3

Rimuovere il comando dell'assistente e riporlo nella tasca sul retro della sedia.



4

Controllare che le ruote anteriori siano posizionate in avanti per garantire una piegatura uniforme.

Suggerimento tirare la sedia all'indietro per allineare le ruote



5

Raggiungi il bordo inferiore del sedile e tira la barra di rilascio verso l'alto per rilasciare il sedile e...



6

...tirare il sedile verso l'alto e verso di sé per ripiegare la Carrozzina. Ripiega il poggiatesta.

Ricarica della batteria della carrozzina elettronica eFOLDi



Per caricare la carrozzina elettrica, collegare il cavo del caricabatterie alla base del controller joystick e collegare la spina CA a una presa di corrente. Questo caricherà **ENTRAMBE** le batterie contemporaneamente.



Per rimuovere le batterie per il viaggio o la ricarica individuale, premere la linguetta rossa verso l'alto e far scorrere la batteria all'indietro.




Le batterie possono essere caricate separatamente dalla sedia utilizzando l'adattatore corto "a spirale" che deve essere prima collegato al cavo del caricabatterie.

Funzionamento della sedia elettrica eFOLDi



Il controller del telecomando dispone di pulsanti per regolare la velocità e display per indicare la carica residua e l'impostazione della velocità.

È possibile disattivare l'avvisatore acustico di retromarcia premendo il pulsante indicato.

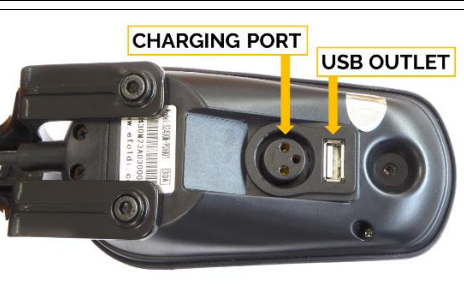

La porta di ricarica della Carrozzina si trova sotto il ricevitore per caricare **ENTRAMBE** le batterie contemporaneamente.

C'è anche una presa USB per alimentare un telefono o un altro dispositivo USB.



Il controllo dell'assistente può essere impostato per regolare la velocità di camminata di un assistente/assistente e fornisce anche un controllo della batteria.

La leva controlla il movimento all'indietro o in avanti.