



## SZYBKA PORADA – POLSKA


eFOLDi 

### Rozkładanie krzesła elektrycznego eFOLDi

Przed rozpoczęciem należy umieścić Power Chair na otwartej przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci.

Rozkładanie jest proste i przy odrobinie praktyki będziesz w stanie rozłożyć go w kilka sekund.

Radzimy poćwiczyć z Power Chair przed pierwszą wyprawą.

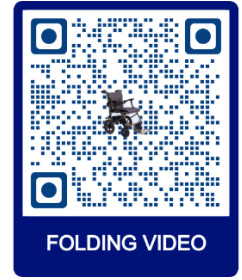

**1** Kółka zapobiegające przewróceniu i ładowarka akumulatora są dostarczane z wózkiem elektrycznym.

**2** Zainstaluj kółka zapobiegające przewróceniu. Te po prostu wciskają się i blokują na swoim miejscu.

**3** Rozłóż krzesło elektryczne, po prostu pchając dolną część siedziska w dół, jednocześnie pociągając dźwignię zwalniającą do góry.



**4** Zainstaluj wsporniki podłokietników w szczelinach i dociśnij je, aż się zablokują.  
**Przewody należy trzymać z dala od punktów ściśnięcia**

**5** Weź jednostkę sterującą i dźwignię i...

**6** ...włóż dźwignię kontrolera w mocowanie podłokietnika pod podłokietnikiem.



**7** wyregulować położenie regulatora i dokręcić pokrętłem radłkowym.

**8** ... Wyjmij kontrolkę operatora z tylnej kieszeni i przymocuj do dźwigni z tyłu.

**9** Pociągnij podnóżek w dół.



**10** Zamontuj poduszki siedzenia, jak pokazano. Są one utrzymywane na miejscu za pomocą rzepów. Upewnij się, że są one złożone na oparciu i pod siedzeniem.


**11** Włóż baterie, aż zatrzasną się na swoim miejscu. Twój Power Chair jest teraz gotowy.

**12** Włącz Power Chair, naciskając przycisk POWER. Pełne informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

## Składanie krzesła elektrycznego eFOLDi

		
<p><b>1</b> Wytącz zasilanie za pomocą przycisku ZASILANIE na pilocie. <b>Zawsze wyłączaj zasilanie, gdy fotel nie jest używany, aby oszczędzać energię akumulatora.</b></p>	<p><b>2</b> Lekko poluzuj radełkowane pokrętko i wyjmij kontroler. Umieść kontroler i pas bezpieczeństwa na poduszce siedzenia. <b>Dokręć pokrętko, aby zapobiec zgubieniu.</b></p>	<p><b>3</b> Zdejmij kontrolkę operatora i umieść ją w kieszeni z tyłu krzesła.</p>
		
<p><b>4</b> Sprawdź, czy przednie koła są ustawione z przodu, aby zapewnić płynne składanie. <i>Porada Pociągnij krzesło do tyłu, aby wyrównać koła</i></p>	<p><b>5</b> Sięgnij pod krawędź siedziska i pociągnij do góry drążek zwalniający, aby zwolnić siedzisko i.</p>	<p><b>6</b> ...pociągnij siedzisko do góry i do siebie, aby złożyć krzesetko elektryczne. Złóż podnóżek.</p>

## Ładowanie baterii krzesła elektrycznego eFOLDi

		
<p>Aby naładować wózek elektryczny, podłącz przewód ładowarki do podstawy kontrolera joysticka i podłącz wtyczkę prądu przemiennego do gniazdka elektrycznego. Spowoduje to jednoczesne ładowanie <b>OBU</b> akumulatorów.</p>	<p>Aby wyjąć akumulatory na czas podróży lub ładowania indywidualnego, naciśnij czerwoną kłapkę do góry i przesunij baterię do tyłu.</p>	<p>Akumulatory można ładować oddzielnie od fotela za pomocą krótkiego adaptera typu „pigtail”, który należy najpierw podłączyć do przewodu ładowarki.</p>

## Obsługa krzesła elektrycznego eFOLDi

		
<p>Pilot zdalnego sterowania ma przyciski do regulacji prędkości i wyświetlacze wskazujące pozostałą moc i ustawienie prędkości.  Sygnalizator cofania można wyłączyć, naciskając wskazany przycisk.</p>	<p>Port ładowania Twojego Power Chair znajduje się pod słuchawką, umożliwiając jednoczesne ładowanie OBU akumulatorów.  Istnieje również gniazdo USB do zasilania telefonu lub innego urządzenia USB.</p>	<p>Element sterujący dla opiekuna można ustawić tak, aby dostosowywał prędkość chodu dla opiekuna/opiekuna, a także zapewnia kontrolę baterii.  Dźwignia steruje ruchem do tyłu lub do przodu.</p>