



HITRI VODNIK - Slovenščina




eFOLDi

Odpiranje skuterja eFOLDi Lite

Preden začnete, postavite skuter pokončno na odprtem prostoru, stran od hišnih ljubljencev in majhnih otrok.

Odpiranje skuterja je preprosto in z malo vaje ga boste lahko nastavili v nekaj sekundah.

Svetujemo vam, da vadite s skirojem, preden se prvič podate ven.

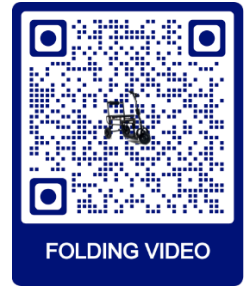

FOLDING VIDEO



1

Sprostite rumeni zapah volanskega droga...



2

...in pustite, da se steber prosto niha.



3

Potegnite krmilo ven in navzgor ...



4

...dokler se ne zaklenejo v navpično črto.



5

Poiščite majhno rumeno stikalo ob strani in ga povlecite, da sprostite sklop sprednjega kolesa.



6

Držite volanski drog in sedež ter ju razmaknite ...



7

...se bo skuter razprl, ko boste potegnili naslon sedeža in volanski drog narazen in...



8

...skuter se bo zaklenil v odprt položaj.



9

Prepričajte se, da so zapahi zaklenjeni na jekleni drog...



10

...če ne, pritisnite nogo navzdol na ploščo za noge, da zaklenete skuter odprt.



11

Če še ni nameščen, namestite sedežne blazine in naslon sedeža, kot je prikazano.



12

Za vklop motorja preverite, ali je magnetna zavora v položaju ZAKLJUČENO.

Zlaganje skuterja eFOLDi Lite

		
<p>1 Naslonjalo sedeža zložite do podnožja sedeža.</p>	<p>2 If the scooter has armrests pull the black toggle to release then fold backrest down as per (1)</p>	
		
<p>4 ...in zložite stolpec navzdol, dokler je zaklenjen z magnetnim zaskokom.</p>	<p>5 Skuter trdno držite za volanski drog in nosilni ročaj ter močno pritisnite steber navzdol proti podnožju</p>	<p>6 Skuter nagnite nazaj pod kotom in uporabite nogo za volanom, da preprečite odmik od vas</p>
		
<p>7 .pritisnite navznoter na volanski drog, dokler se sprednje kolo ne zaskoči ...</p>	<p>8 ... in zapah volanskega droga se zaskoči v položaj.</p>	<p>9 ritisnite volanski drog, da se tesno zaskoči ob okvir.</p>

Operacija eFOLDi Lite

		
<p>Za vklop skuterja pritisnite sivi gumb pod zaslonom baterije.</p> <p>Izberite (D) Vožnja ali (R) Vzvrtno vožnjo in pritisnite ročico za plin, da greste.</p>	<p>Baterijo je mogoče polniti s pomočjo polnilnih vrat, kot je prikazano.</p> <p>Vedno takoj napolnite baterijo kolikor je mogoče, ko je zaslon označuje jantar.</p>	<p>Baterijo lahko odstranite tako, da dvignete zapah in dvignete baterijo navzgor.</p> <p>Po odstranitvi lahko baterijo napolnite z uporabo vtičnice n</p>